

Invacare® | **Eslingas**




Mejor posicionamiento y fácil colocación

La gama de eslingas Invacare provee soluciones seguras y cómodas en las transferencias y movimientos de pacientes. Esta selección de eslingas han sido desarrolladas con la colaboración de Terapeutas Ocupacionales para asegurar las formas y el soporte adecuados para el usuario y una fácil colocación para la persona que lo cuida.

Todas las eslingas poseen una marca verde en la espalda con el objetivo de ayudar a los cuidadores a posicionar a los pacientes correctamente y con seguridad en el arnés, al considerar que las marcas deben alinearse con la columna.

Todas las eslingas han sido aprobadas para el certificado TÜV conforme la norma EN NF 10535.




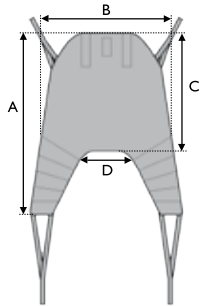

Invacare **Eslinga Universal Hamaca**

El usuario estará en una posición ligeramente reclinada y cómoda ya que esta eslinga sujeta todo el cuerpo y la cabeza. La **Eslinga Universal Hamaca** está destinada para usuarios que tienen un control limitado de la cabeza, tronco o caderas, o para transferencias hacia o desde una posición acostada. Esta eslinga también puede ser utilizada sin los soportes a la altura de la cabeza, tan sólo removiendo los plásticos de fijación.

| | Tallas | A | B | C | D |
|-----------------|-----------|------|------|-----|-----|
| Rojo | XS | 1040 | 740 | 610 | 340 |
| Naranja | S | 1080 | 840 | 730 | 380 |
| Amarillo | M | 1420 | 1000 | 830 | 400 |
| Azul | L | 1550 | 1100 | 920 | 510 |
| Negro | XL | 1680 | 1150 | 920 | 550 |


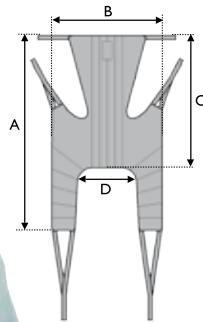


Invacare **Eslinga Universal con Reposacabezas**

El usuario estará en una posición ligeramente reclinada y cómoda ya que esta eslinga sujeta todo el cuerpo y la cabeza.

La **Eslinga Universal** con reposacabezas permite a los usuarios mantener los brazos libres durante la transferencia. Está destinada para usuarios que tienen un control limitado de la cabeza, tronco o caderas, o para transferencias hacia o desde una posición acostada. Este modelo tiene, a la altura de la espalda, un segmento reforzado para asegurar una mejor distribución del peso y comodidad del usuario.

| | Tallas | A | B | C | D |
|-----------------|----------|------|-----|-----|-----|
| Amarillo | M | 1510 | 950 | 930 | 450 |

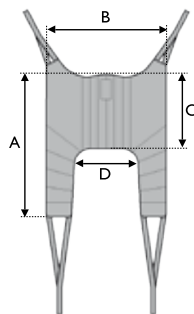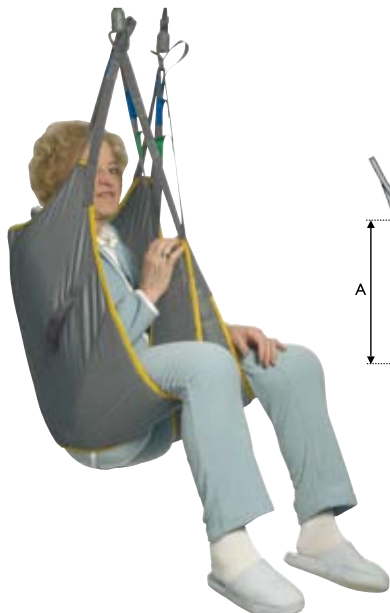


Invacare **Eslinga Universal Estándar**

Esta eslinga sujeta todo el cuerpo incluyendo los hombros, sin embargo debe ser utilizada en pacientes que tengan control de la cabeza. La **Eslinga Universal Estándar** puede ser utilizada en transferencias para o desde una posición sentada, siendo muy fácil su colocación.

Este modelo tiene, a la altura de la espalda, un segmento reforzado para asegurar una mejor distribución del peso y comodidad del usuario.

| | Tallas | A | B | C | D |
|-----------------|-----------|------|------|-----|-----|
| Naranja | S | 1000 | 920 | 510 | 410 |
| Amarillo | M | 1090 | 1050 | 560 | 480 |
| Azul | L | 1180 | 1090 | 580 | 560 |
| Negro | XL | 1240 | 1250 | 585 | 710 |

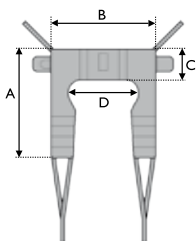


Invacare Eslinga Higiene

Dentro de la gama de Eslingas, la Higiene está destinada para usuarios con movilidad limitada y que buscan mayor acceso de limpieza y vestirse/desvestirse durante la transferencia.

Es utilizada para transferencia desde y hacia una posición sentada. Se caracteriza por ser de fácil aplicación.



| | Tallas | A | B | C | D |
|-----------------|----------|------|-----|-----|-----|
| Naranja | S | 870 | 710 | 200 | 430 |
| Amarillo | M | 950 | 800 | 230 | 490 |
| Azul | L | 1020 | 900 | 230 | 600 |

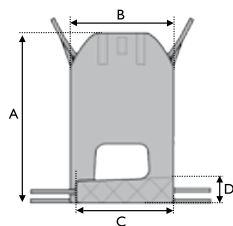

Invacare Eslinga de Fácil Colocación

Esta eslinga sujeta todo el cuerpo y la cabeza, destinada para usuarios con discapacidad alta. Se caracteriza por su fácil aplicación gracias a los soportes de las piernas diseñados especialmente para ello, de igual forma la eslinga permite una buena posición de la cadera, todo esto hace que el usuario mantenga una posición sentada erguida. La Eslinga **de Fácil Colocación** es también utilizada para Amputados. Es muy fácil de colocar tanto en las dos posiciones, sentada y acostada.


| | Tallas | A | B | C | D |
|-----------------|----------|------|-----|-----|-----|
| Naranja | S | 1130 | 760 | 640 | 180 |
| Amarillo | M | 1200 | 800 | 675 | 190 |
| Azul | L | 1270 | 860 | 720 | 210 |

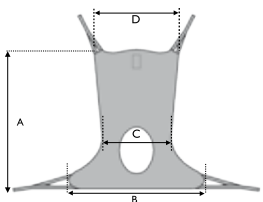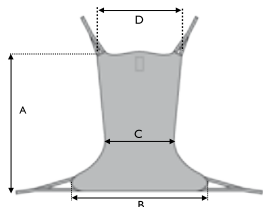

Invacare Eslinga Comfort y Comfort Toilet

Estas eslingas sujetan todo el cuerpo y la cabeza. Las eslingas **Comfort** y **Comfort Toilet** son ideales para aquellos que tienen dolores crónicos. Estas eslingas son útiles también para amputados y para los usuarios que tienen, debido a la posición, dolores específicos y prefieren permanecer sentados. La **Eslinga Comfort** se coloca mientras el usuario está acostado y durante la transferencia el usuario está sentado. **Eslinga Comfort Toilet** se caracteriza por tener una abertura en la parte inferior.


| | Tallas | A | B | C | D |
|-----------------|-----------|------|------|-----|------|
| Naranja | S | 1150 | 1050 | 550 | 1020 |
| Amarillo | M | 1400 | 1170 | 610 | 1180 |
| Azul | L | 1450 | 1290 | 670 | 1280 |
| Negro | XL | 1460 | 1330 | 745 | 1470 |

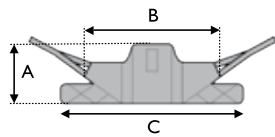

Invacare Eslinga de Transferencia

Diseñada para su utilización con las grúas de bipedestación Invacare pero compatible con otros tipos de grúas de incorporación*, esta eslinga ofrece una transferencia cómoda y segura para aquellos usuarios con suficiente control en el cuerpo pero sin independencia para permanecer de pie. Adicionalmente, el paciente debe poseer equilibrio mental y buen estado físico y mantener el control de la cabeza, así como también la habilidad de sujetar la grúa durante la transferencia. La eslinga tiene un refuerzo acolchonado así como también material antideslizante en la espalda para asegurar una posición cómoda durante la transferencia.

| | Tallas | A | B | C |
|-----------------|----------|-----|-----|------|
| Naranja | S | 260 | 840 | 950 |
| Amarillo | M | 330 | 895 | 1170 |
| Azul | L | 360 | 950 | 1270 |

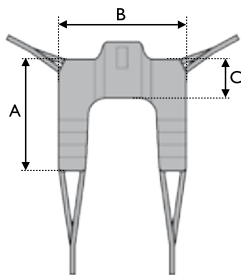


Invacare Eslinga de Transferencia Sentado

La eslinga *Invacare* de **Transferencia Sentado** ha sido diseñada para su utilización con las grúas de bipedestación Invacare pero es compatible con otras grúas; ésta permite realizar una **transferencia sentado** fácil y cómoda. Esta eslinga es utilizada en pacientes con un buen estado físico y con control de la cabeza que son capaces de sujetarse de la grúa.

| | Tallas | A | B | C |
|-----------------|----------|------|-----|-----|
| Amarillo | M | 1020 | 895 | 260 |
| Azul | L | 1180 | 950 | 330 |

* Las eslingas Invacare han sido probadas para grúas Invacare, para su utilización con otras grúas consulte compatibilidades.

Guía de tallas

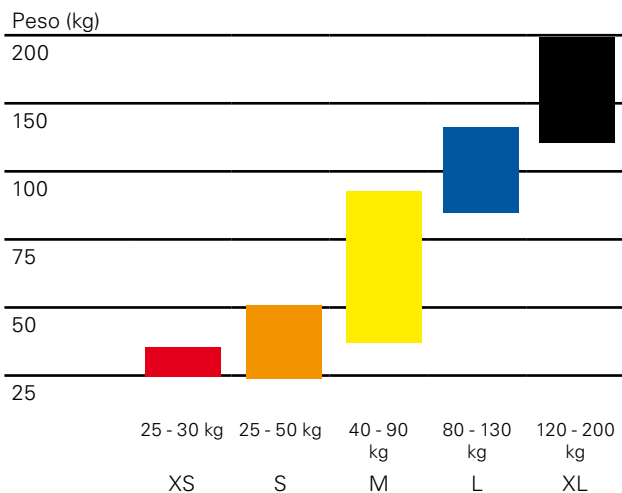

200 kg¹



95°



Todas las eslingas deben ser probadas y ajustadas al usuario para asegurar comodidad y seguridad durante las transferencias.



Algunas tallas y material de las eslingas descritas en este catálogo se consideran como producto disponible bajo pedido especial.
 - Es importante realizar un análisis de riesgo de la piel de las personas que deben permanecer en la eslinga largos períodos de tiempo.
 - Dimensiones de las eslingas en mm.